

Armario RF 90 según norma EN 14470-1 altura 140cm

Referencia: 887.918.44



ARMARIO DE SEGURIDAD, PARA EL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS INFLAMABLES

Resistencia al fuego de 90 minutos según la norma EN 14470-1

Construido completamente en láminas de acero con espesor de 1 a 1,5 mm, plegadas a presión en frío, barnizadas con polvo epoxi antiácidos y con posterior tratamiento en galería térmica a 200°C.

Certificación según norma EN 14470-1. (producción certificada por BVQI).

Aislamiento formado por paneles de fibra de lana de roca de alta densidad (exenta de fibrocerámica) para altas temperaturas (800°C) y paneles de sulfato de calcio.

Paredes internas del armario acabadas en laminado melamínico con alta resistencia incluso a los vapores más agresivos.

- Cierre hidráulico de las puertas con temperatura superior a 47 °C
- Cerradura con llave y bloqueo de puerta
- Patas regulables
- Válvulas de cierre automático (70 °C) para entrada y salida de aire, certificadas 90 minutos, colocadas en la parte superior e inferior del armario
- Orificio de expulsión de Ø100 mm en la parte superior del armario


- Bisagras anti chispas
- Junta termo-dilatante de 3 cm
- 2 estantes-bandeja de acero con recubrimiento epoxi (capacidad aproximada 16 L), certificados para soportar hasta 80 kg.
- Dimensiones: 1093 × 420 × 39 h mm, regulables en altura con pasadores de acero sobre cremallera de acero pintado
- Cubeta inferior de acero pintado con rejilla de apoyo
 - Dimensiones: 1093 × 445 × 100 mm (capacidad aproximada 45 L)
- Toma de tierra para evitar cargas electrostáticas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensiones

Referencia	Material estantes	Peso (Kg)	Dim. Exteriores (mm) Ancho x Fondo x Alto	Dim. Interiores (mm) Ancho x Fondo x Alto	Carga por estante (kg)*
886.233.52	Estantes acero pintado	230	1200 x 600 x 1400	1095 x 446 x 1235	80

**Uniformemente repartida*

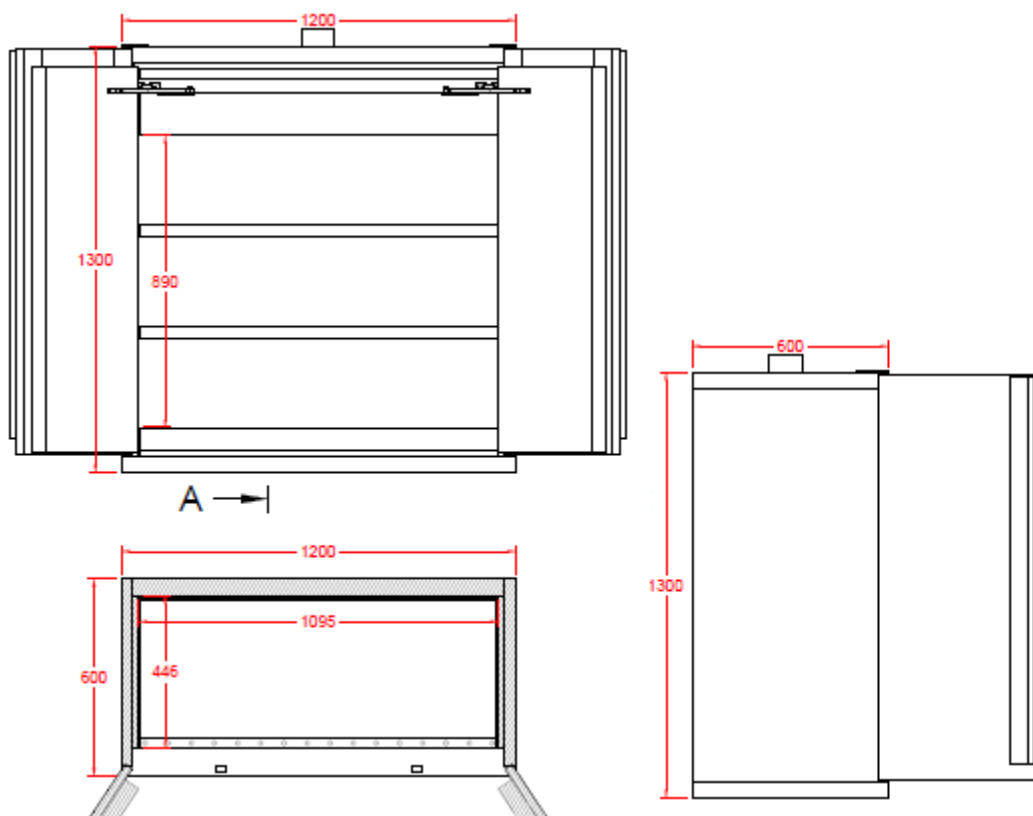

ACCESORIOS

- Extractor anti chispas para evacuación de gases (ref. HALEOF100ABPMY11).
- Filtro de carbón activo para disolventes (ref. 989.703.54)
- Estante adicional en acero pintado (ref. HALRIP90VMY11)

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO:

- Es imprescindible que el armario se sitúe en una superficie perfectamente nivelada y que se ajusten los pies para evitar inclinaciones que podrían afectar al cierre de la puerta por desplazamientos en la estructura.
- En función de la clasificación de inflamabilidad del líquido almacenado, la capacidad máxima de los armarios se puede ver limitada por la normativa APQ ITC-MIE-APQ10. Consúltenos para más información al respecto.